



cubeX²

cubic zirconia

Translucide comme le lithium disilicate – La force du Zirconia




**ESSAYEZ-LE
GRATUITEMENT**

- Beauté et force
- Préparation conservatrice 0.8mm
- Cimentation conventionnelle
- Couleur correspondante (pas de gris)
- Couronne simple et pont 3 unités dans toutes les positions

Disponible en disque de 98.5mm

Taille	Prix	Coût approximatif (basé sur 20 unités par disque)
98.5mm x 10mm	200\$	10,00\$
98.5mm x 12 mm	217\$	10,85\$
98.5mm x 14mm	233\$	11,65\$
98.5mm x 16mm	250\$	12,50\$
98.5mm x 18mm	267\$	13,35\$
98.5mm x 20mm	283\$	14,15\$
98.5mm x 25mm	317\$	15,85\$

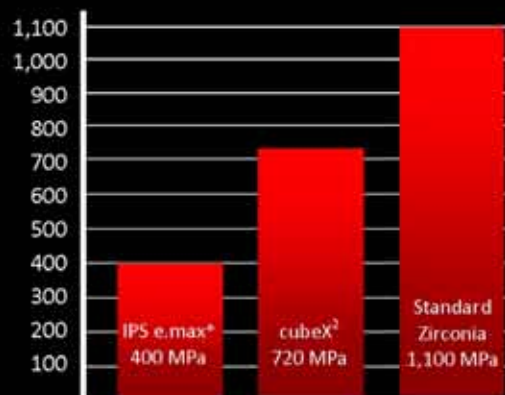

DCS – Station de travail sur comptoir

Élimine les odeurs, les vapeurs et les particules de poussière.

- Zone de travail illuminée
- Peut opérer 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ceci permettant de laisser les bécards à l'intérieur de la zone confinée.
- Fonctionnement silencieux
- Facilement déplaçable

DCS16-GE-M1 inclut un petit chariot sur roulettes (14.5" h x 24" l x 17" p)

DCS16-GE-M2 inclut un grand chariot sur roulettes (24" h x 29" l x 20" p)



1135²⁵\$

DCS16-GE-M1

1230²⁵\$

DCS16-GE-M2

JetStream - Collecteur de poussière compact

Le collecteur de poussière JetStream est devenu un standard qui offre des avantages significatifs et une performance exceptionnelle.

- Maximum 110 CFM avec une pression maximum de 90" W.C.
- Le pré-filtre 1 micron est facilement remplaçable
- Le filtre HEPA est efficace à 99.97% sur les particules plus grosses que 0.3 micron.
- Silencieux, le bruit est réduit à 49 dBA
- Moderne et facilement transportable
- Variations de vitesse
- Approuvé CSA/UL

695⁰⁰\$

JS-1200

*En option, un contenant de 6 gallons (26 l) pour les gros débris.



FOREDOM®



FOREDOM K.1030 Micro Moteur Portable

Le tout nouveau ensemble de micro moteur portable de Foredom. Cette nouvelle conception a l'avantage de comprendre un moniteur digital format de poche avec une lecture de la variation de la vitesse sur le devant de l'appareil.

Vitesse d'utilisation de 0 à 30000 tours/minutes.

595⁰⁰\$

Item: K.1030

BioTEXT® Lingettes

Lingettes désinfectantes universelles. Peuvent être utilisées sur le vinyle, le plastique, les textiles, les surfaces peintes et les composants. Peuvent aussi servir à nettoyer les claviers, les téléphones, les tablettes, les écrans tactiles et les surfaces peintes.

- Antimicrobien biologique
- Économique
- Usages multiples
- Non corrosif
- Ne tache pas

138⁰⁰\$
TXW1802

Ensemble intro de 8 rouleaux et 2 canettes.



Mouth Off™

Vaporisateur antimicrobien pour protège-dents, appareils orthodontiques, prothèses dentaires

- Préviens la formation des bactéries et des champignons sur les appareils dentaires.
- Protège votre investissement
- Vous protège des infections
- Laisse une impression de fraîcheur dans la bouche.

49⁹⁵\$
11-SMD-010

Bouteille 10 X 60 mL



Porte-empreinte Édenté

Porte-empreinte disponible

Peut facilement être perforé pour l'impression d'implant. Alloue une rétention maximum sans l'utilisation d'un adhésif. Économique. Ce porte-empreinte en styrène procure une excellente impression détaillée.



5+1

keystone
industries

38⁹⁵\$
0921704

Boîte assortie (12)
2 de chaque taille

Embouts Mélangeurs

26⁹⁵\$


- YM100YB
Jaune (Pqt/50)
- YM110PB
Rose (Pqt/50)
- YM120GB
Vert (Pqt/50)
- YM130PB
Violet (Pqt/50)



Bavettes Dentaires

- 23-1210 - Bleu (Pqt/500)
- 23-1211 - Vert (Pqt/500)
- 23-1212 - Blanc (Pqt/500)
- 23-1213 - Rose (Pqt/500)
- 23-1214 - Jaune (Pqt/500)
- 12-1215 - Lavande (Pqt/500)

28⁹⁵\$

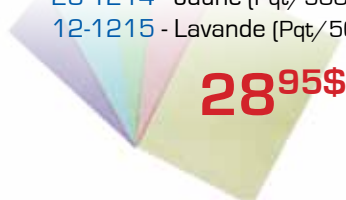

Masques



Item: #5614

5²⁵\$

5+1

NITECH^{md}

RONCO NITECH^{md}

- Un mélange breveté de matériaux synthétique de qualité première
- 100% sans poudre



NITRILE

RONCO NITRILE

- Texture diamantée pour une meilleure poignée
- 100% sans poudre



10+1

RONCO TOUCH

- Nitrile de première qualité de couleur rose
- 100% sans poudre



LATEX

RONCO SILKTEX

- Barrière de protection supérieure avec une excellente élasticité
- Disponible sans poudre ou légèrement poudré



NOUVEAU

SR Vivodent® S PE

Des dents adaptées aux exigences les plus raffinées

Brillant, tout simplement!

- Davantage de personnalisation: 15 formes antérieures
- Effet naturel: structure en couches PE exclusive
- Pour toutes les indications: matériau DCL hautement réticulé



Pour en savoir plus:

www.ivoclarvivadent.com/pe-toothline



ivoclarvivadent.com

©2015 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent et Vivodent S PE sont des marques de commerce d'Ivoclar Vivadent, Inc



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Nouveau!

DU MÊME MANUFACTURIER FABRIQUANT LE
MATÉRIEL DE REBASAGE MOLLOPLAST B

DETAX

Permaliner®

- Polymérisation plus courte (1 heure seulement)
- Une couleur naturelle plus pâle
- Excellente adhésion, aucun besoin d'adhésif

85⁹⁵\$

02092- 30 g

168⁹⁵\$

02146 - 70 g



NU-DENT

NETTOYANT PROFESSIONNEL
POUR LES PROTHÈSES

Enlève les taches de café, thé,
tabac et calcaire de façon
sécuritaire et efficace, sans
endommager les appareils.



Nettoyant professionnel puissant
64 utilisations par bouteille
Nettoie en moins de 25 min.



943230

4²⁰\$

Dental Vault

Un boîtier de rangement et
de nettoyage révolutionnaire.
Prothèses - Partiels - Appa-
reils pour apnée et bruxisme
- Appareils d'orthodontie

GRATUIT avec l'achat
d'une caisse de
NuDent (48)

Ressemble à
une bougie!



05585 Denturevault Dental (1)

Duplistar 70

Duplistar 90

**Ruthinium®
Group**



Dureté: 70Sh.A
Couleurs: Base A -
Vert pâle / Catalyste B
- Gris



- Excellents détails de duplication
- Stabilité dimensionnelle
- Haute élasticité
- Absence de déformation en moufle
- haute résistance (>200°C)



Dureté: 90Sh.A
Extra-rigide
Couleurs: Base A -
Rose / Catalyste B
- Gris

2180008
Spécial

85⁰⁰\$

Rég.115\$
1,5 + 1.5 Kg

2180010
Spécial

176²⁵\$

Rég.235\$
5 + 5 Kg

2180009
Spécial

85⁰⁰\$

Rég.115\$
1,5 + 1.5 Kg

2180011
Spécial

176²⁵\$

Rég.235\$
5 + 5 Kg

Sympro

L'appareil de qualité supérieure de nettoyage pour les dentiers, les appareils orthodontiques et éclisses.



1240⁰⁰\$
6500-0050

GRATUIT - SYMPRO
liquide universel avec
l'achat d'un SYMPRO

6500-0600



MT3

- Moteur de puissance supérieure de 1 300 W
- Nettoyage facile et rapide avec panneau frontal ouvrable sans outil nécessaires.
- Table d'angulation pour modèle avec mécanisme de niveau (90/98 degrés).
- La table et le conduit d'eau sont amovibles.



1345⁰⁰\$
1808-1000

GRATUIT - Klettfix
Disquess (pqt/5) avec
l'achat d'une unité MT3

Klettfix 80/120



Twister

L'appareil Twister - Contrôle manuel
L'appareil de malaxage sous vide Twister, de construction compacte, est utilisable pour tous les matériaux de modelage appliqués couramment. La saisie de tous les paramètres du mélangeur est simple rapide.



2185⁰⁰\$
1826-0000

GRATUIT - Bol ou
Support à Twister
avec l'achat d'une
unité Twister



Waxlectric II

Travaillez de façon confortable et précise, modelez facilement de la cire grâce au réglage exact, constant et régulier de la température répartie sur les embouts des instruments.



2157-1000

580⁰⁰\$

GRATUITS - 2 Embouts
à sculpter avec l'achat
d'un Waxlectric II



Waxprofi

Les réservoirs de cire sont réglés électroniquement offrant ainsi une température de travail idéale et une consistance optimale de la cire.



1440-1000

481⁴⁰\$

GRATUIT - Cire
à l'achat d'un
Waxprofi



Basic ECO

- Unité de micro-sablage compact et performant.
- Procédure de travail précis et de grande efficacité.
- Concept innovateur de vue parfaite technologie unique LED.



2949-4025

995⁰⁰\$

GRATUIT - 2
Buses de sablage
à l'achat d'un
Basic ECO



Ceramicus

Pinceau pour céramique en fibres synthétiques microstructurées.



2+1

6 tailles de brosses :
1, 2, 4, 6, 8, 1/0

lay:art Style

Les pinceaux en poils naturels lay:art style offrent une qualité supérieure pour répondre aux exigences les plus pointues.



ITEM	DESCRIPTION	RÉG.	SPÉCIAL
17250008	Lay:art taille 8 slim	126,90\$	104,97\$
17250006	Lay:art taille 6 slim	93,45\$	77,20\$
17250004	Lay:art taille 4 slim	55,95\$	46,25\$
17250002	Lay:art taille 2 slim	55,95\$	46,25\$
17250001	Lay:art Brosse pour opaques	55,95\$	46,25\$
17250000	Lay:art Pinceau pour couleurs	46,20\$	38,15\$
17251000	Lay:art Pinceau 1x #2, 1x Opaque, 1x #1	72,70\$	59,95\$

Takanishi

Pinceau en poils synthétiques de très grande qualité et éprouvé depuis de nombreuses années : pour un modelage optimal de la céramique.



2+1

5 tailles de pinceaux
au choix : 1, 2, 3, 4, 5

GEO Classic cire de modelage

Les cires Geo Classic conviennent parfaitement au montage par addition. Elles se caractérisent par une synchronisation optimale des qualités des matériaux.

2+1



31⁵⁰\$

75 g (2.63 oz.) beige-opaque [4920100](#)
75 g (2.63 oz.) gris-opaque [4920200](#)
75 g (2.63 oz.) menthe-opaque [4920300](#)

75 g (2.63 oz.) beige-transparent [4950100](#)
75 g (2.63 oz.) grey-transparent [4950200](#)
75 g (2.63 oz.) mint-transparent [4950300](#)

GEO Avantgarde cire de modelage

L'utilisation d'une spatule électrique présente des exigences particulières auxquelles les cires GEO Avantgarde répondent pleinement. Les qualités de modelage idéales sont préservées et permettent d'obtenir un résultat précis.

2+1



31⁵⁰\$

75 g (2.63 oz.) beige-opaque [4970100](#)
75 g (2.63 oz.) gris-opaque [4970200](#)
75 g (2.63 oz.) menthe-opaque [4970300](#)
75 g (2.63 oz.) dent couleur-opaque [4970400](#)

75 g (2.63 oz.) beige-transparent [4971100](#)
75 g (2.63 oz.) bleu-transparent [4971200](#)
75 g (2.63 oz.) menthe-transparent [4971300](#)

Verrou à douille Easy-Snap

Système de verrou à douille perfectionné pour une tenue sûre de la prothèse. La faible taille permet de nombreuses utilisations.

- un nouveau mécanisme permet une bonne tenue de la prothèse.
- un Snap que l'on ressent à l'ouverture et fermeture donne plus de sécurité au patient.
- dimensions faibles pour toute situation en bouche
- également utilisable quand peu de place est disponible
- montage simple avec trois variantes possibles



La rondelle-ressort offre une tenue sûre à l'ouverture et à la fermeture de l'axe du verrou à douille. Mécanisme simple qui offre la plus haute sécurité.

La construction primaire se prépare toujours de la même façon pour chaque application. Ceci réduit les besoins en explications et accélère le procédé de fabrication.



Sculpture simple de la construction primaire selon la situation du modèle. Un montage des dents est toujours avantageux pour déterminer la situation exacte du verrou.



Avec le foret de centrage on détermine le forage. Ainsi on empêche un glissement sur le côté du foret Diatit-Multidrill.



Le forage est facilité à l'aide d'huile de forage et de fraisage. Ne fraiser qu'une seule fois, on évite ainsi une perforation de forme ovale.



Le forage est fermé avec de la cire.



On enlève à nouveau la cire à la main avec le Rapid 2,0. Il se forme alors une petite cavité qui reflète la position exacte sur le modèle en revêtement.



Le modèle est prêt pour la duplication. Quand on travaille selon le procédé de retrait, cette étape de travail n'est pas nécessaire.



Modèle en matériau de revêtement coulé selon le système de duplication brendent. La haute précision de reproduction des matériaux de revêtement facilite la mise en œuvre ultérieure.



On fixe légèrement le gabarit d'apport de cire dans la petite cavité reproduite. On procède à la sculpture de l'in-frastructure avec une épaisseur minimum de 0,5 mm.



On enlève le gabarit d'apport de cire et on obtient le logement pour le verrou à douille.



Sur le côté en face on reconnaît bien l'orifice de sortie pour le verrou à douille.



On fixe le verrou à douille en position correcte avec Qu-resin.



On termine la prothèse.



Verrou à douille
Easy-Snap E
1 pièce
REF 440 0N65 8



Tige à sculpter E
1 pièce
REF 440 0065 6



Entretoise céramique E
2 pièces
REF 440 0065 7



Gabarit d'apport de cire
1 pièce
REF 440 0066 1

Abraso-Sil Acryl

80 mm En raison de la chaleur du polissage, la toison spécial à pores ouverts et les poils de chunking blanchis absorbe plus de pâte à polir et donc réduit le temps de travail à 50% vitesse recommandée 3000rpm. 1 pièce



Ø 80 mm
1 pièce

8 + 1 GRATUIT!

ROPAK/Kompaktopaker UV

L'esthétique au-delà de comparaison
L'opaque rose montre la perfection.



Appliquez avec la brosse intégrée directement sur la surface de métal propre.



Rég. 139,29\$
99⁵⁰\$

Ropak Kompaktopaker
[rose] 20ML 54000133

Rég. \$76,57
56⁰⁰\$

Kompaktopaker Zahnfärben
[dent couleur] 10ML 54000105

Bredent Diagen Turbo

Turbos Diagen sont des diamants frittés très agressifs qui fonctionnent efficacement sur le zirconium d'oxyde tels que Procera™, Emax™ et tous les autres matériaux céramiques. Chaque pierre est moulé pour fournir des propriétés et des coupes de broyage optimales et efficace jusqu'à la dernière couche.



85⁰⁰\$

Cylinder
Ø 6.5 x 13 mm
2 pièces
REF 340 0017 0




60⁰⁰\$

Cone
Ø 3.5 x 11 mm
2 pièces
REF 340 0015 0



65⁰⁰\$

Inverted cone with
recess - Ø 12 x 6 mm
1 pièce
REF 340 0024 0

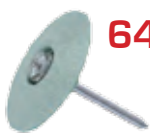

64⁰⁰\$

Lens
Ø 22 x 2 mm
1 pièce
REF 340 0021 0



64⁰⁰\$

Disc
Ø 22 x 2 mm
1 pièce
REF 340 0022 0




85⁰⁰\$

Disc
Ø 22 x 4,5 mm,
1 pièce
REF 340 0019 0

6 + 1 GRATUIT!

ou valeur équivalente

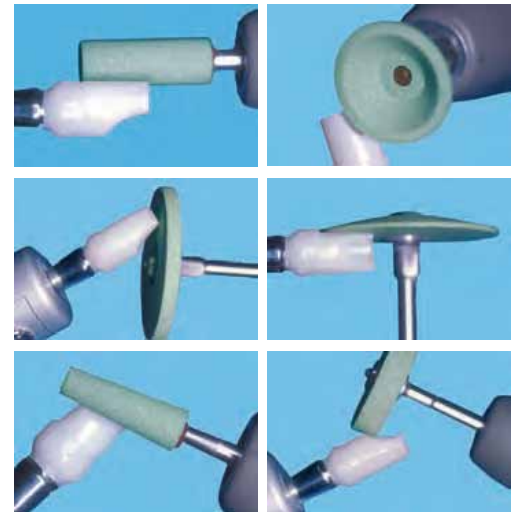

Coffret de Tournevis Universel

Convient aux vis du marché à 98%. Utilisable dans la clé dynamométrique, couple réglable de 10 à 40 Ncm. Le serrage correct des vis est ainsi sécurisé.

Ensemble de tournevis universel pour implants, complet
RÉF. 310 0001 2

1995⁰⁰\$
Rég. 2233,00\$



Clé dynamométrique à cliquet

Coupe réglable de 10 à 40 Ncm.

350⁰⁰\$
Rég. 508,00\$



RÉF. 330 0115 5

Ruthinium CAD/CAM DISQUES




Des disques PMMA pour la fabrication de couronnes et ponts durables.
Les disques PMMA sont manufacturés avec des molécules d'acrylique [cross linked] qui garantissent les détails de précisions ainsi que la résistance.

Avantages:

- Haute reproduction de détails au fraisage.
- Absence de fractures même sur les couches minces.
- Résistance à l'abrasion.
- Fluorescence
- Absence de porosité et stabilité chromatique
- Biocompatibilité



	RUTHINIUM DISQUE SIMPLE COUCHE	RUTHINIUM DISQUE MULTI-COUCHE
Couleur	A1 - A2 - A3 - A3.5 - B1 - B2 - C3 ROSE - TRANSPARENT - RX	A1 - A2 - A3 - A3.5 - B1 - B2 - C3
Code	7900087	7900088
Diamètre	98.5MM	
Épaisseur	16 mm - 20 mm - 25 mm	
Prix	85,00\$	125,00\$

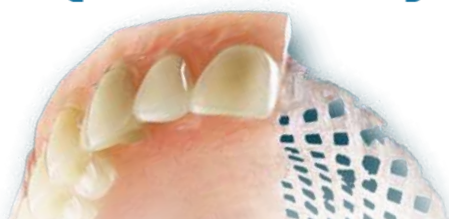

Les prothèses sur implants ONT BESOIN D'ÊTRE RENFORCÉES!

PROMOTION

Achetez l'ensemble Fiber Force à 535 \$
et Recevez 1 paquet de Fiber Force ND et 1
paquet de Fiber Force mesh 1mm Gratuitement!

La trousse FiBER FORCE® inclut:

- 2 - boîtes de FiBER FORCE grilles
- 1 - boîte de FiBER FORCE tresses 2mm
- 1 - seringue de résine de 3ml
photopolymérisable CST Flow
- 100 - feuilles d'espaceur en cire rose (0.5mm)
- 100 - pamphlets pour patients
(avec présentoir en carton)
- 1 - appareil à former sous vide EZ VAC



"ALL ON CST®"

PROMOTION

Achetez l'ensemble CST de départ et
recevez 1 recharge de CST Gratuitement!

La trousse complète CST® inclut:

- 2 - fibres compressibles CST® de 450mm (hybrides 1:6)
- 2 - fibres compressibles CST® de 300mm (hybrides 1:4)
- 1 - seringue de 3ml de CST® Flow Resin avec embouts
- 1 - bouteille de 5ml de CST® Bond Resin
- 4 - piliers de support temporaires CST®

Brosses Pour Prothèses



Acry-Tray



**Achetez 1 boîte de 50
et Obtenez 12 boîtes
à prothèse!**



**Achetez 1 et
Obtenez 1 livre
d'alginate et une
spatule!**

Gratuit!
1 lb. Alginate
#2060001 &
1 Spatule #904SA



0800001

69⁹⁵\$

Elite HD

4 + 1 Gratuit!



Zhermack Alginate



**5 + 1
Gratuit!**

Tokuso Rebasage II

**Fraise
Gratuite!**

24\$^{valeur}
#5410.060

**Achetez 1 et
Obtenez 1 fraise
en carbure!**

20506
Tokuso Rebase Kit

169⁵⁰\$



Diamond D



**Achetez 5 livres et
Obtenez 25 boîtes
à prothèse!**

1013065
5 Lb. Diamond D H/C
Original P + L

Easy Soft-Paquet Économique

**Fraise à tailler
Gratuite!**

#7275.060

Boîtier Pour Prothèse

10 + 1 Gratuit!



Molloplast B 170g.

**Fraise à tailler
Gratuite!**

#7275.060



03001



ES0502 - Paquet économique

Vous pouvez commander par téléphone: 514-352-9303

Par fax: 514-352-2738

Par courriel: central.dental@videotron.ca

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?



M82-C



Plaster Bench (3-Unit Combo)



M-93



M-SAM

Un excellent rapport qualité-prix!

1-888-910-3368

8150 Boul. Métropolitain Est, #320, Anjou, (Qc) H1K 1A1 Tél: (514) 352-9303 Téléc: (514) 352-2738 www.CentralDentalLtd.com