

Printemps 2026

Dépliant

Promotions en vigueur du 1er avril au 30 Juin 2026



Balayez pour passer votre commande
ou pour parler à un représentant ou
composez le

1-800-268-4442

 **Central Dental**
The laboratory and denturist supply specialist.

Des possibilités infinies



SR Vivodent® DCL

- 42 formes de dents antérieures individuelles
- Faites d'un matériau DCL hautement réticulé durable
- Gamme de teintes contemporaine



DEMANDEZ UN
ÉCHANTILLON

ivoclar.com/sr-vivodent-dcl

La précision, sur simple pression d'un bouton

Système IvoBase®

Matériau de base pour prothèses dentaires avec processus d'injection entièrement automatisé

- Haute précision grâce à la compensation du retrait
- Processus entièrement automatisé
- Unités prédosées pour un ratio de mélange précis

Économisez 20 %
sur le système IvoBase

(628518BU)*



making work easy

Les essentiels Renfert : des solutions de base pour les laboratoires dentaires modernes



MT3 Marathon

Art. n° : 18081500 (disque partiellement diamanté)

\$3,204.00

\$2,895.00

ÉCONOMISEZ PLUS DE 300 \$



MT3 Klettfix

(disque en corindon, grains 80)

Art. n° : 18081000

\$1,950.00

+ GRATUIT

Disque Klettfix, 5/emb.

Avec l'achat du produit MT3 Klettfix
Art. n° : 67000100



SYMPRO

Nettoyeur automatique pour appareils

Art. n° : 67001000

\$1,195.00

+ GRATUIT
20 nettoyages

help:ex plaque f

à l'achat de SYMPRO

Art. n° : 67000100
(4 x 1 litre)



Pâte de cuisson Renfert

Pâte à cuisson pour la stabilisation des objets céramiques

Art. n° : 19220304 (4 x 12g)

La nouvelle pâte de cuisson de Renfert est le choix sensé pour les techniciens dentaires qui exigent des résultats uniformes et propres, sans aucun compromis – même avec les céramiques les plus délicates. Peut être utilisée jusqu'à une température de 1 500°C.

\$52.95

(paquet de 4)

Offre en vigueur du 1^{er} avril au 30 juin 2025. Les marchandises gratuites seront expédiées avec la commande complète.



Dynex Brillant

Disques de séparation en diamant flexibles

Art. n° : 560220 - 0,2 x 20 mm (10/emb.)

Art. n° : 562520 - 0.25 x 20 mm (10/emb.)

Art. n° : 560320 - 0.3 x 20 mm (10/emb.)

**ACHETEZ-EN 4
ET RECEVEZ-EN
1 GRATUIT**

Dynex Brillant

Disque de meulage diamanté

Art. n° : 560820 - 0.8 x 20 mm (1/emb.)



**ACHETEZ-EN 4
ET RECEVEZ-EN
1 GRATUIT**

Achetez-en 4 et recevez-en 1 GRATUIT!

Promotions du 2e trimestre valide du 1er avril au

PERFIT

Matériaux d'empreinte
hydrophiles de précision

49.95\$

4+1

PER001	Perfit A Putty Prise normale
PER002	Perfit A Putty Prise rapide
PER003	Perfit PVS Light Body Prise normale
PER004	Perfit PVS Light Body Prise rapide
PER005	Perfit PVS Heavy Body Prise rapide
PER006	Perfit PVS Heavy Body Prise normale



Le bon produit PERFIT
pour chaque prise
d'empreinte

Imprimante dentaire 3D Accufab-CEL **SHINING 3D** DENTAL

Votre chemin vers le succès en impression 3D

Fiable

- Détection et chauffage en temps réel de l'environnement de la cabine
- La température et l'humidité de la cabine sont continuellement surveillées lors de l'impression
- Cette fonction de chauffage assure précision et stabilité lors de l'impression, ce qui entraîne un taux de réussite plus élevé

Précis

- L'imprimante Accufab-CEL a atteint un haut niveau de précision d'impression atteignant, soit +35 μm . La répartition uniforme de la lumière joue un rôle crucial dans la précision de l'impression. 3D a développé une NOUVELLE lithographie programmable alignée qui offre un meilleur rendement et une meilleure précision.

Abordable

- À un prix de **7 995,00 \$**, elle se compare favorablement aux principales marques offrant des caractéristiques similaires.



Achat spécial du T2 avec l'imprimante Accufab-CEL :

Recevez 2 bouteilles GRATUITES de 1 litre de résine à gouttières souples Shining 3D



Voici la résine 3D pour gouttières souples SS1

La solution optimale pour l'impression de gouttières souples offrant des performances exceptionnelles sur le plan de la transparence, de la morphologie et de l'occlusion. Conçu avec une haute résistance à la traction et à la flexion.

Excellent rapport qualité-prix à 395,00 \$/litre
N° M00005861

SHINING 3D
DENTAL



Aoralscan Elf

Occlusion plus intelligente

Léger • Petit • Puissant

Appelez pour
obtenir une
démonstration
800-268-4442

12 600 \$

Coin technique

Zircone de liaison/piliers e-max à Ti-base à l'aide de l'adhésif DTK de Bredent

Colle DTK


- Hygiénique car stérilisable
 - Collage propre par isolant FGP
 - Application intra et extra-orale
 - Collage de tous les matériaux en prothèse
- Pour la céramique (e-max®) → utiliser du K-Primer
 Pour la zircone/MP/Titane → utiliser du primaire MKZ
 Pour les métaux précieux → utiliser du primaire MKZ + activateur MKZ EM
 Pour BioHPP/ PEEK → utiliser visio.link



Protocole de collage pour piliers




Isoler et laisser sécher le canal de vis, la zone gingivale et l'épaulement du pilier à coller

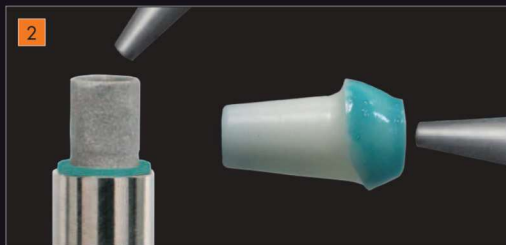

Sabler avec de l'oxyde d'aluminium 110µm:
 3 bars de pression pour le titane / MNP
 2 bars de pression pour la zircone



Fermer le canal de vis avec de la cire

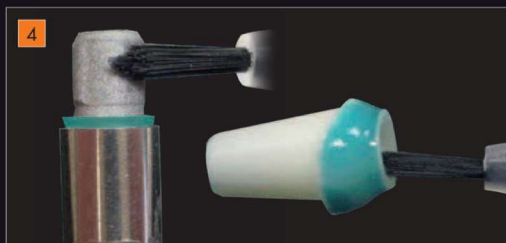

Appliquer du primaire MKZ pour le titane / la base à coller en MNP et la zircone



Pour e-max® appliquer le primaire K et pour la base en titane le primaire MKZ.

Coin technique

Zircone de liaison/piliers e-max à Ti-base à l'aide de l'adhésif DTK de Bredent



Appliquer de la colle DTK (transparente ou opaque), appuyer le pilier sur la base à coller, ensuite introduire la vis dans le canal.



Polymériser avec bre.LUX Power Unit2 par ex.




Retirer la vis du canal


DTK Adhesive kit
#54001185

Prix
spécial

189,00\$
Économisez
\$30.00

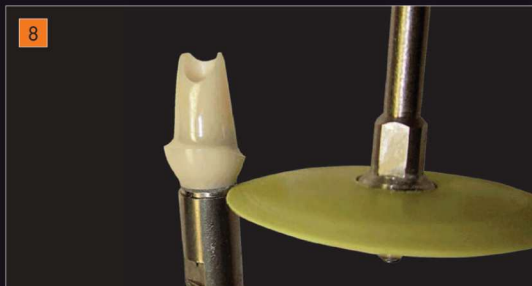

Sabler le pilier et retirer les excédents

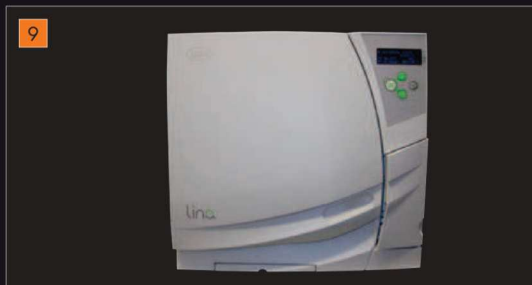

On peut stériliser des piliers collés.

⚠ Mise en garde! Renseignez-vous auprès du fabricant sur la stabilité hydro-thermique par la dotation d'oxyde d'aluminium en cas de piliers en dioxyde de zirconium translucides et hautement translucides!

bredent
group

0098940F-20180329

Sous réserve d'erreurs et de modifications



Toutes les désignations marquées d'un ® ou ™ sont des marques protégées et/ou des identifications d'entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle.



**Ruthinium®
Group**

Nous prenons soin de votre sourire

Dents en acrylique

Ruthinium

*Une qualité supérieure
à un prix économique*

Disponible
exclusivement
auprès de



10+1

AcryPlus

Dents en acrylique à
quatre couches

La nature
dans un sourire.



\$28.50

(1x6)

AcryLux

Dents en acrylique à
trois couches

Naturel brillant.



\$12.20

(1x6)

AcryRock

Dents en acrylique à
deux couches

Dureté naturelle.



\$4.99

(1x6)

Dental Manufacturing S.p.A.

Via Cà Mignola Nuova, 1699
45021 Badia Polesine - Rovigo (Italy)
+39 0425 51628 - 0425 590587 - Fax +39 0425 590156
info@ruthinium.it

www.ruthinium.it



Une flexibilité adaptée à chaque exigence de teinte

Disques PMMA (ombragé et multicouche)



2+1

ACHETEZ 2 disques PMMA, **RECEVEZ-EN 1 GRATUIT.**

Code promotionnel: CPMMAFY26

Dentsply Sirona offre aux cabinets et aux laboratoires une gamme de plus en plus variée de matériaux pour la fabrication économique et précise de prothèses cliniquement impeccables et esthétiquement d'excellente qualité.

Disques Cercon®



3+1

ACHETEZ 3 disques Cercon, **RECEVEZ-EN 1 GRATUIT. GRATUIT.**

Code promotionnel: CCER31FY26

20+5

ACHETEZ 20 disques Cercon, **RECEVEZ-EN 5 GRATUITS. GRATUIT.**

Code promotionnel: CCER20FY26

Disques Lucitone Digital Fit™



3+1

ACHETEZ 3 disques Lucitone Digital Fit, **RECEVEZ-EN 1 GRATUIT. GRATUIT.**

Code promotionnel: CLFD31FY26

20+5

ACHETEZ 20 disques Lucitone Digital Fit, **RECEVEZ-EN 5 GRATUITS. GRATUIT.**

Code promotionnel: CLFD20FY26

Promotion du T2
10 % de rabais sur tous les produits WR



PÂTE PRECISE
WR600 - 53,99 \$/pâte, 3 oz
WR602 - 169,99 \$/pâte, 12 oz
La pâte indicatrice de pression PRECISE est utilisée pour la mise en place de prothèses complètes, immédiates et partielles.



BROSSES PRECISE
WR604 - 17,50 \$
Brosses applicatrices en aluminium – Le partenaire parfait pour la pâte indicatrice de pression PRECISE.



Nettoyant pour brosses PRECISE
WR603 - 23,45 \$/bouteille de 150 ml
Dissout rapidement tout type de pâte indicatrice de pression et s'essuie complètement.



SMOOTH-EX
WR750 - 23,25 \$
Une excellente solution pour créer le bord parfait sur les protège-dents et le matériel de blanchiment.



Round-Off
WR760 - 22,95 \$
La solution essentielle pour arrondir les bords des matériaux en double stratifié et la résine durcie sous vide.



Feuilles de mise en moufle E-Z-D
WR980 - 14,98 \$
Pre-cut paper flasking sheets are valuable time Les feuilles de mise en moufle en papier prédécoupées permettent de gagner un temps précieux. Les feuilles assurent un démouflage facile et permettent de déterminer facilement les cas avant que le démouflage ne soit complètement terminé.



Stik-Bak
N° 0705 - 15,49 \$
Spécialement conçu pour le remontage des modèles de prothèses – Stik-Bak offre une prise incroyablement solide avec seulement quelques gouttes et se détache du montage d'un léger coup de couteau en plâtre et d'un marteau.



Nettoyeur à ultrasons Isonic
N° DS400B

Comprend un b cher de 600 ml

**PRIX SP CIAL -
195,00 \$**



Micromoteur Sunburst
N° P-900/ X-99L

- Tr s l ger
- Parfait pour les ajustements en cabinet

**PRIX SP CIAL -
350,50 \$**



Vibrateur
N° 307

**PRIX SP CIAL -
125,00 \$**



Bo te de meulage
Meta
N° 800-2100

**PRIX SP CIAL -
349,00 \$**



Pince angulaire
N° 070351 -
**PRIX SP CIAL -
65,50 \$**

Pince   3 branches
N° 070352 -
**PRIX SP CIAL -
65,00 \$**



Pinc s   pl tre
N° 650-19

**PRIX SP CIAL -
85,00 \$**



Bol m langeur en acrylique grand format avec couvercle
N° D11A

**PRIX SP CIAL -
35,00 \$**



Flasque de duplication de proth ses Mestra
N° 020206

**PRIX SP CIAL -
195,00 \$**

2+1



M langeur d'alginate
N° ADA004002

**PRIX SP CIAL -
1 495,00 \$**

** CONOMISEZ
300\$**



Mestra pour flasque
N° 020202

**PRIX SP CIAL -
175,00 \$**



Nitrile - 3.2 mil
Bleu Glacé

8+2

Nitrile - 2.5 mil
Aqua

8+2

Latex - 7.2 g
Blanc crème

8+2

- TP 9889A5
 - P 9889A6
 - M 9889A7
 - G 9889A8
 - TG 9889A9
- 100 par boîte**

- TP 92395
 - P 92396
 - M 92397
 - G 92398
 - TG 92399
- 200 par boîte**

- TP 29225
 - P 29226
 - M 29227
 - G 29228
 - TG 29229
- 100 par boîte**

Price: \$10.⁰⁰
Net Price: \$8.⁰⁰

Price: \$19.⁶⁵
Net Price: \$15.⁷⁰

Price: \$13.⁰⁰
Net Price: \$10.⁴⁰

Supermax Healthcare Canada

☎ 1(866) 428-9188 | 1(450) 926-2828
✉ cservice@supermaxcanada.com
📍 766-B rue Bériault, Longueuil, QC, J4G 1R8
🌐 www.aureliaglovescanada.com

Tous les produits gratuits sont livrés par les distributeurs.
Promotion avec le programme TOUS les produits gratuits : Les distributeurs doivent envoyer mensuellement leurs réclamations de produits gratuits à Supermax, au plus tard 30 jours après la fin de la période.
Les promotions peuvent être annulées à tout moment. Supermax ne paiera aucun supplément au distributeur pour la manutention gratuite.
Pour toutes les questions, veuillez contacter notre service à la clientèle | Les produits gratuits doivent être d'une valeur égale ou inférieure au produit original acheté



Promotions VITA Laboratoires Dentaires Avril - Juin 2026

DENTS



En tant que nouveau client, achetez un inventaire de **dents VITA MFT** de plus de 1 500 \$, et recevez gratuitement un guide de moules MFT et un guide de teintes 3D-MASTER

En tant que nouveau client, achetez un inventaire de **dents VITA Premium** de plus de 3 500 \$, et recevez gratuitement un guide de moules Premium

PROTHÈSES DENTAIRES DIGITALES



Achetez 10 disques VITA VIONIC pour dents et obtenez-en 2 gratuit !
Code Promo: QDEN2621



Achetez 10 disques pour dents VITA VIONIC et obtenez une résine de liaison MULTIDOSE gratuite !
Code Promo: QDEN2622



Achetez 10 disques pour base VITA VIONIC et obtenez-en 2 gratuits !
Code Promo: QBAS2621



Achetez 5 disques pour base VITA VIONIC et 10 disques pour dents VITA VIONIC et obtenez une trousse LC Standard VITA AKZENT gratuite !
Code Promo: QDEN2622



NU-DENT®

NETTOYANT PROFESSIONNEL POUR LES PROTHÈSES

Obtenez 4
bouteilles
GRATUITES

avec
l'achat
d'un étui
(48)

Enlève les taches de café,
thé, tabac et calcaire de façon
sécuritaire et efficace,
sans endommager
les appareils.

Nettoyant professionnel puissant
64 utilisations par bouteille
Nettoie en moins de 25 min.



 **Central Dentaire Ltée**
Le spécialiste des fournitures pour laboratoires et denturologistes

Tél: 1 (888) 910-3368 Téléc: (514) 352-9303 www.CentralDentalLtd.com

Non recommandé pour
une utilisation sur l'or.